

Menú de prueba

Tiroides		Fertilidad		Metabolismo Óseo		Diabetes	
	Enfermedades Infecciosas		Marcadores Tumorales		Cardiaco		Función Adrenal
FT3 FT4 T3 T4 TSH Anti-Tg Anti-TPO Tg rT3 TRAb	HIV Combo HBsAg Anti-HBs HBeAg Anti-HBe Anti-HBc Anti-HC V Anti-TP (Sífilis) HAV IgM* HEV IgG* HEV IgM* Anti-HAV*	β-HCG Total FSH LH Prolactina Estradiol PSA Libre PSA Total CA 125 CA 19-9 CA 15-3 CA 242 CA 125 CA 15-3 PG I PG II HE4 CA50	PTH Intacta Calcitonina Vitamina D total BNP CK-MB Myoglobin Troponin I hs-cTnI NT-proBNP ST2* hs-cTnT*			Insulina Péptido	DHEA-S Cortisol ACTH
Fibrosis de Hígado		ToRCH		Inflamación		Anemia	
	COVID-19		Hormona de crecimiento		Tamizaje SD		Hipertensión
Laminina Acido Hialurónico PIIINP Colágeno IV	SARS-COV-2 IgG SARS-COV-2 IgM SARS-COV-2 S-RBD IgG SARS-COV-2 Anticuerpos Neutralizantes	Toxo IgG Toxo IgM Rubeola IgG Rubeola IgM CMV IgG CMV IgM HSV-1+2 IgG HSV-1+2 IgM HSV-1 IgG HSV-2 IgG TOXO IgG Avidez CMV IgG Avidez	GH IGF-1 IGFBP-3*	Procalcitonina IL-6 sCD14-ST	PAPP-A* β-HCG Libre*	Ferritina Vitamina B12 Folato RBC Folato	Renina Aldosterona

*: Está desarrollando

CL-960i

Sistemadeinmunoensayo de quimioluminiscencia

Especificaciones técnicas

Información general		Medición y Sistema de reacción	
Rendimiento	Hasta 180 tests por hora	Modo de detección	Conteo de fotón
Principio de medición	Plataforma de partículas superpara magnéticas de micrón Con reactivos etiquetados de fosfatasa (ALP) alcalina Y sustrato AMPPD	Detector de señal	Contador de fotón de Fotomultiplicador (PMT)
		Calibraciónd de PMT	Módulo de referencia de LED
		Posiciones de incubación	82
		Temperatura	Precisión: 37±0,3 °C
		Unidad de mezcla	Mezclado de agitador vórtex no táctil
		Carga de cubeta y Recogida de desechos	
		Cubeta	Cubeta de plástico desechable 88 cubetas por bandeja, se pueden cargar dos bandejas en un lote, carga y descarga continua Contenedor de desechos, 200 cubetas por caja
		Carga de cubeta	
		Recogida de desechos	
Ensamblaje de muestra		Condiciones de trabajo	
Alimentador de muestra	Carga y descarga continua de muestra 50	Alimentación	100-240 V~50/60 Hz
Posicionese de muestra	Sonda de acero, detección de nivel de líquido, detección de coágulos, Protección contra colisión horizontal y vertical 10-200 ul, con incremento de 1 ul Dilución automática con 1:2~1:40	Potencia de entrada	1000 VA
Sonda demuestra		Temperatura de funcionamiento	15-30 °C
		Humedad relativa	35 %RH~85 %RH, sin condensación
		Dimensiones	860 mm x 740 mm x 560 mm (An x Fo x Al)
		Peso	145 kg
		Altura	-400 m - 3000 m
Volumen demuestra		Sistema de sustrato	
Dilución demuestra		Botella desustrato	300/500 tests por botella, agujereado del fondo
		Carga desustrato	Capacidad de carga continua durante el test
		Calentamiento de sustrato	Calentamiento continuo
		Volumen de aspiración	200 ul
		Unidad de separación magnética	
		Ensamblaje de separación	Separación magnética de 4 fases
		Temperatura	Precisión: 37±0,3 °C




CL-960i

Sistemadeinmunoensayo de quimioluminiscencia






Uno de los más pequeños del mundo; analizadores CLIA totalmente automatizados

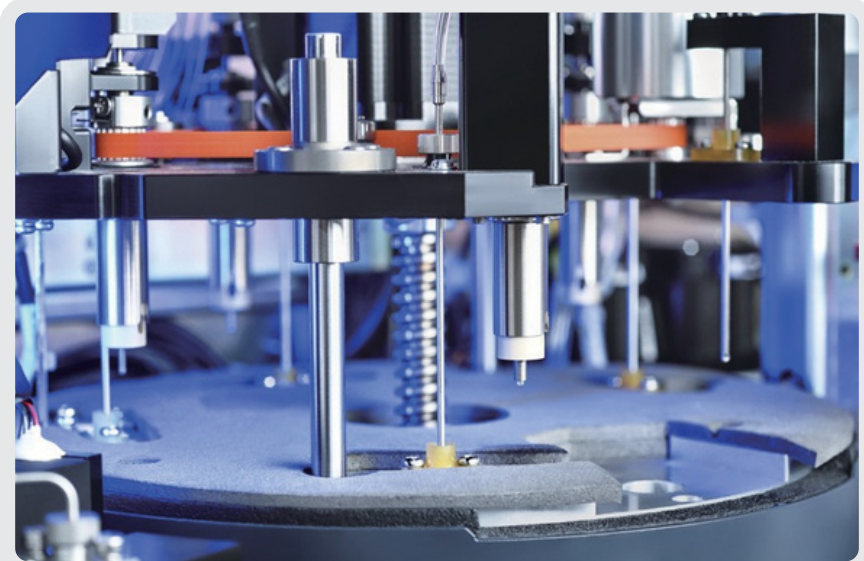

Separación magnética precisa con fiabilidad de rendimiento consistente

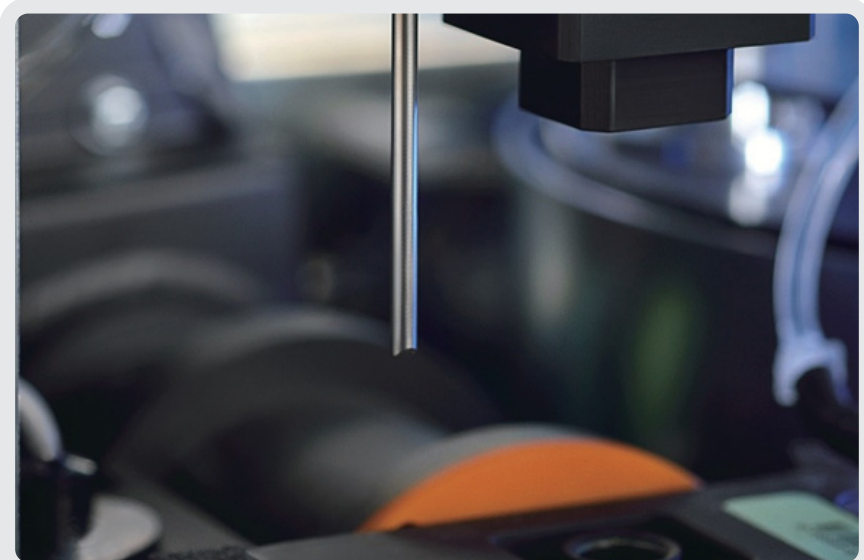

Separación de desechos sólidos-líquidos
Respetuoso con el medio ambiente




Tecnología de lavado por escobillas
Eficiencia mejorada y sobrante minimizado

CL-960i El tamaño perfecto para su laboratorio



Inicio con un solo botón
Extremadamente fácil de usar

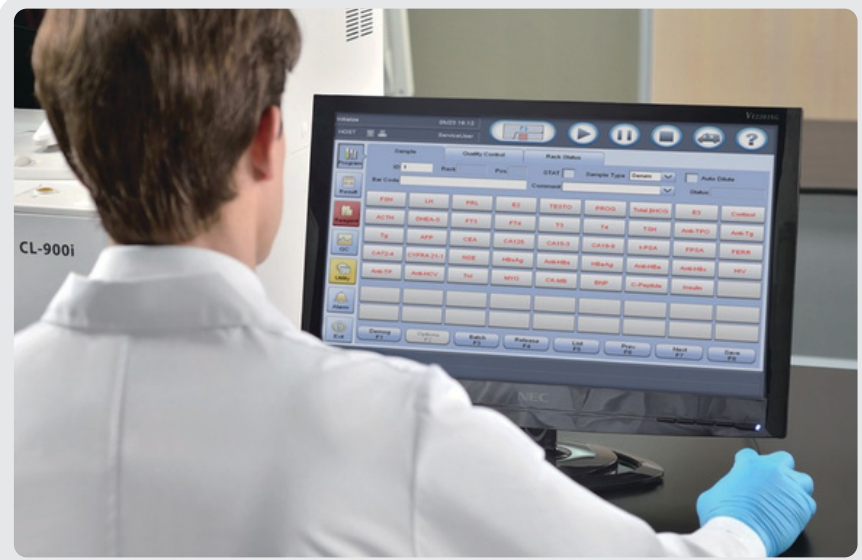

Interfaz de software intuitiva
Acceso fácil a todas las funciones



Carga continua de reactivos y consumibles



Sin necesidad de mantenimiento por parte del usuario
Reduce la carga de trabajo



Gestión inteligente de consumibles