


ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGÍA

BC-20s

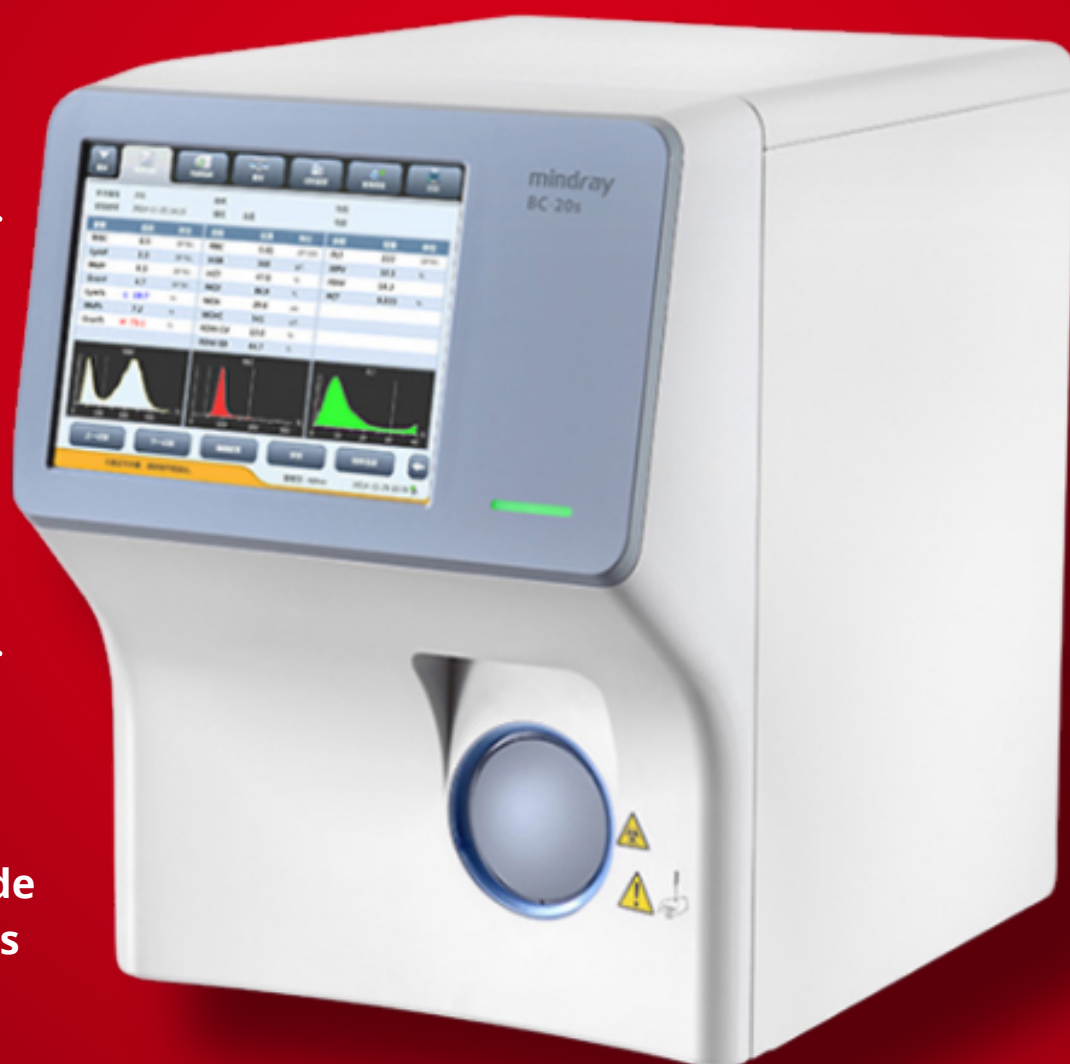

Muestreo con vial
abierto

CBC+3-DIFF

Almacenamiento de
200 000 resultados
con histogramas

40 muestras
por hora

mindray
healthcare within reach



COTIZA AHORA
228 164 5941
222 115 1526



**ENTREGAS
RÁPIDAS**

Principio de funcionamiento

Recuento de glóbulos blancos, eritrocitos y plaquetas por impedancia. Medición de hemoglobina libre de cianuro.

Parámetros

Recuento de glóbulos blancos	WBC
Cantidad de linfocitos	Lymph#
Cantidad de células de tamaño mediano	Mid#
Cantidad de granulocitos	Gran#
Porcentaje de linfocitos	Lymph%
Porcentaje de células de tamaño mediano	Mid%
Porcentaje de granulocitos	Gran%
Recuento de glóbulos rojos	RBC
Concentración de hemoglobina	HGB
Volumen corpuscular medio	MCV
Hemoglobina corpuscular media	MCH
Concentración media de hemoglobina corpuscular	MCHC
Coefficiente de variación del ancho de distribución de glóbulos rojos	RDW-CV
Desviación estándar del ancho de distribución de glóbulos rojos	RDW-SD
Hematocrito	HCT
Recuento de trombocitos	PLT
Volumen medio de trombocitos	MPV
Ancho de distribución de trombocitos	PDW
Plaquetocrito	PCT

- Histogramas de WBC, RBC y PLT.

Performance

WBC($10^9/L$), RBC($10^{12}/L$), HGB(g/L), PLT($10^9/L$)

Volumen de muestra

Modo prediluido: 40 μ l

Modo sangre completa: 9 μ l

Rendimiento

40 muestras/hora

Capacidad de almacenamiento de datos

Hasta 200.000 resultados incluida la información numérica y gráfica.

Impresión

Grabadora térmica en papel de 50 mm de ancho. Impresión en varios formatos. Conexión opcional de impresora externa.

Comunicación

- 1 Puerto LAN compatible con el protocolo HL7.
- 4 puertos USB para actualización de software, impresora externa, lector de código de barras, teclado, mouse y adaptador de WiFi.
- Soporte bidireccional LIS.

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura: 10°C~40°C

Humedad: 10%~90%

Presión del aire: 70kPa~106kPa

Especificaciones eléctricas

CA 100V-240V

Frecuencia: 50Hz/60Hz

Potencia: 300 VA

Dimensión y peso

Profundidad (410 mm) x ancho (300 mm) x altura (400 mm)

Peso: 20Kg



mindray

healthcare within reach



COTIZA AHORA

228 164 5941

222 115 1526



ENTREGAS

RÁPIDAS