

ÍTEMS DE PRUEBA

Gasometría básica	Hematología	Electrólitos	Bioquímica
pH, pCO ₂ , pO ₂	Hct	K ⁺ , Na ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻	Glu, Lac

PARÁMETROS DE CÁLCULO

24 parámetros en total:
cH⁺, cH⁺(T), pH(T), pCO₂(T), pO₂(T), HCO₃⁻atd, HCO₃⁻std, BB(B), BE(B), BE(ecf), ct CO₂, Ca⁺⁺(7.4), AnGap, tHb(est), sO₂(est), pO₂(A-a), pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A), pO₂(a/A)(T), RI, RI(T), pO₂/FI O₂, pO₂(T)/FI O₂, POP

CARTUCHOS DE REACTIVO

Núm. de catálogo	Ítems de prueba	Cualificación
W459	pH, pCO ₂ , pO ₂	CE NMPA
W461	K ⁺ , Na ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻	CE NMPA
W465	pH, pCO ₂ , pO ₂ , K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Hct	CE NMPA
W466	pH, pCO ₂ , pO ₂ , K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Hct, Glu, Lac	CE NMPA



Wondfo



¡Luchamos contra el tiempo y aprovechamos cada oportunidad de tratamiento para los pacientes críticos siempre y donde sea!

Analizador de Gases Sanguíneos

- Confiable
- Portátil
- Preciso
- Eficiente



BGA-102

CE NMPA

1 VENTAJAS

Proceso de muestreo automático

Sin operación manual, el procedimiento es más sencillo.

Libre de mantenimiento

Diseño compacto del instrumento, sin recorrido interno del líquido, sin necesidad de mantenimiento.

Fácil de usar

Solo dos pasos se requieren para completar una prueba de muestra.

Resultados confiables

Buena correlación con Radiometer ayudando a los médicos a hacer un diagnóstico.

Cómodo de llevar

Pequeña y ligera, el mango portátil facilita su transporte.



302(L.)*226(A.)*180(Alt.) mm
No más de 6,5 kg
(Incluida la batería, pero sin el adaptador de corriente)

Las ventajas del diseño permiten su adaptabilidad a diferentes escenarios.



Batería incorporada



Impresora integrada



Función de conexión LIS



Vídeo de operación

2 ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Equipo necesario para que las instituciones médicas traten a pacientes en estado crítico.




UCI/UCC/UCIN



Sala de urgencia



Quirófano

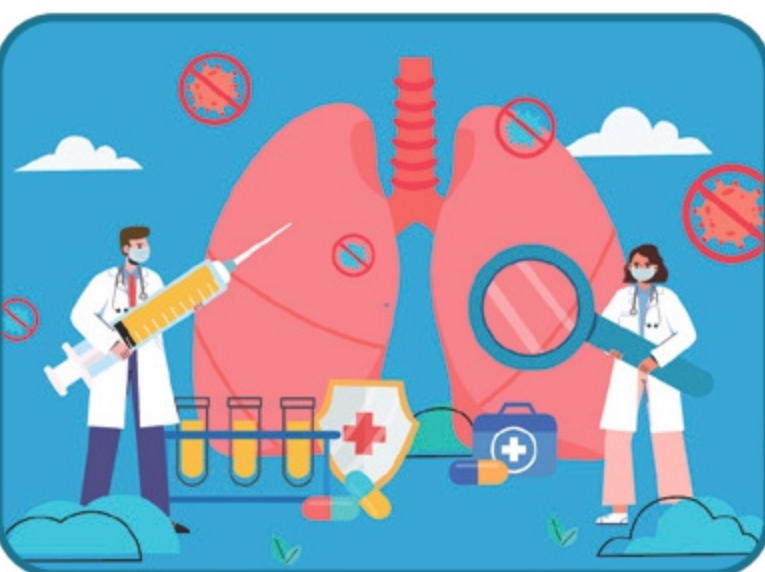

Departamento de Neumología




Ambulancia

3 OPERACIÓN


Dos pasos de operación, una prueba bien hecha.




Muestrear

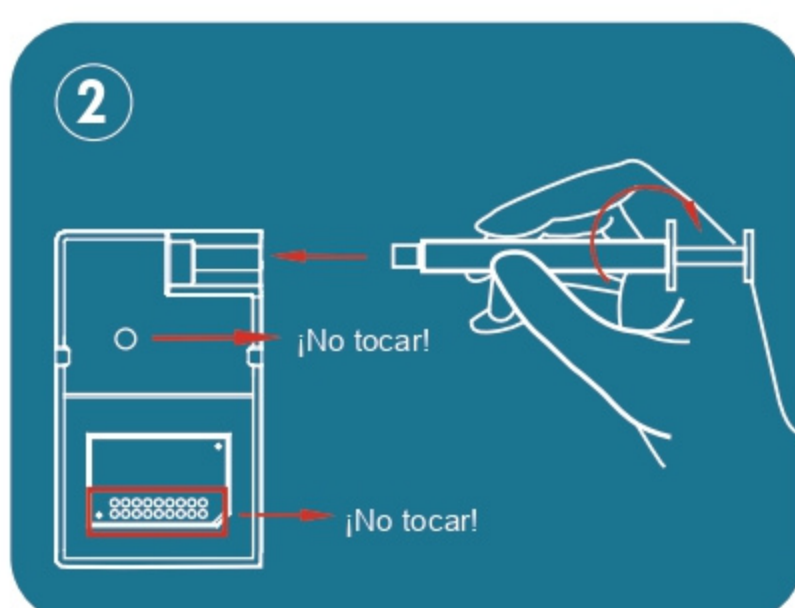

Juntar

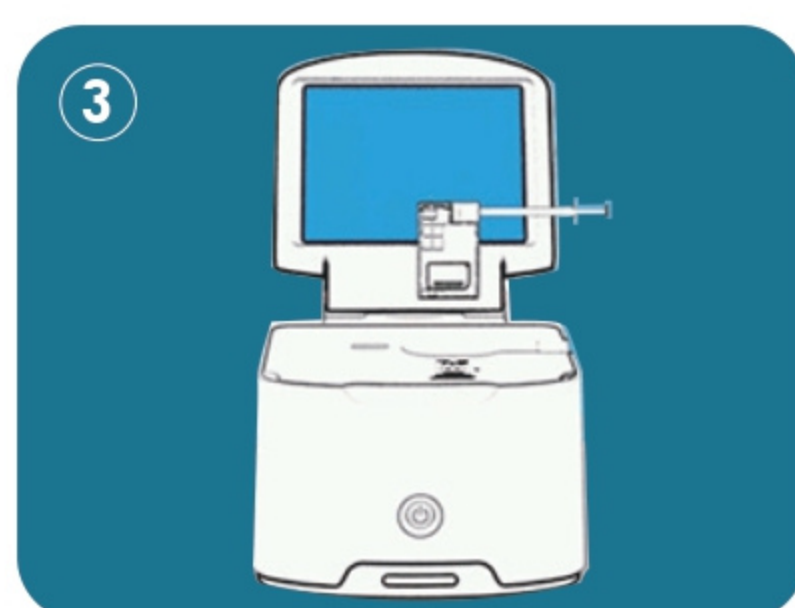

Insertar

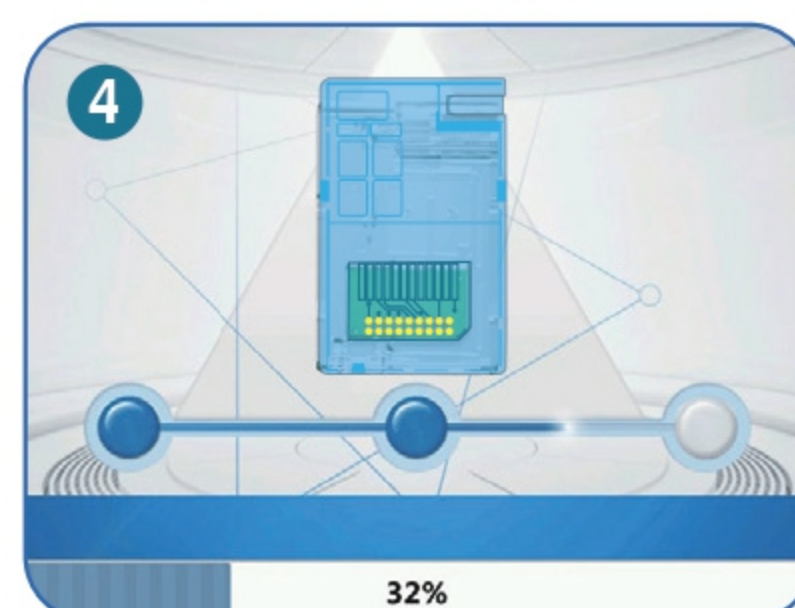


Leer

4 COMPONENTES

Menos componentes en el producto, mejor experiencia para el usuario.

Tarjeta de reactivo

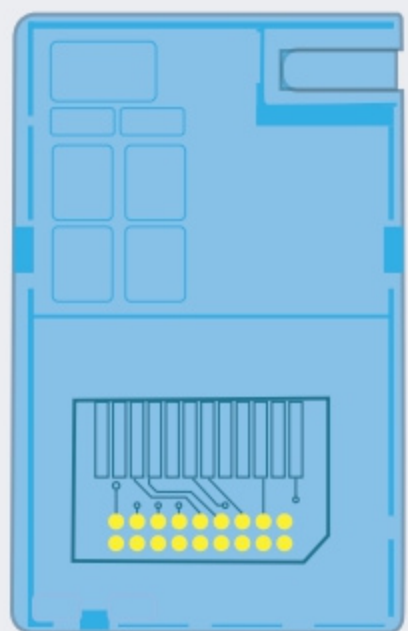

Una tarjeta, múltiples soluciones.


- Tipo de muestra: Sangre total arterial
- Volumen de muestra: 80 μ L
- Tiempo de prueba: 45 s
- Conservación a temperatura ambiente hasta 12 meses (para W466: hasta 9 meses)
- Apto para jeringa

Cartucho de reactivo



- Temperatura de almacenamiento: 2~8 °C
- Caducidad: 12 meses
- Caducidad instalada:
10 parámetros: 45 días
8 parámetros: 60 días

Control de calidad

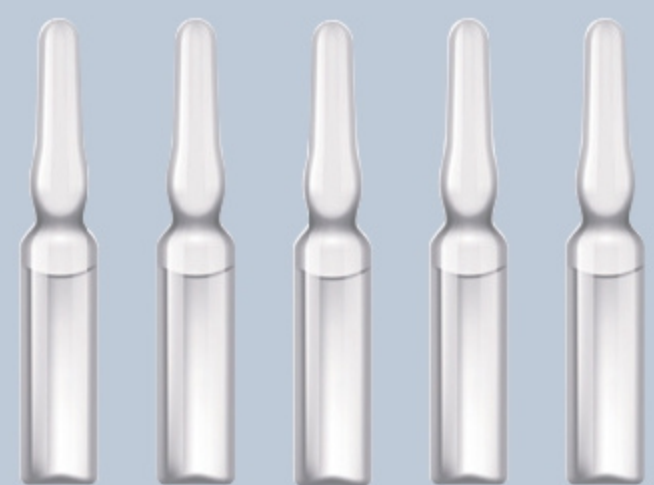

- Análisis de control de calidad a 3 niveles
- Control de calidad externo